

光源器械



电源线



光源线



光源线头



保险管



光源机



脊柱微创通道

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd

北京市朝阳区东三环南路98号高和蓝峰大厦20层 (100021)

电话Tel: 010-58611761

传真Fax: 010-58611751

www.clzd.com

400-010-1998



关注骨科动态
欢迎扫一扫

版本号: 2020 V1

声明:




本技术手册所述内容, 供内部人员参考, 医护人员应根据患者的实际情况选择最为合适的治疗方案

脊柱微创手术通道





脊柱通道系统用于建立脊柱微创通道




- 具有侧向和头/尾向撑开功能
- 通道可视,配备冷光源系统
- Y型光缆可接冷光源机/特有充电电源系统
- 可用于单节段和多节段建立通道
- 可用于椎间处理和配合中空多轴钉系统使用

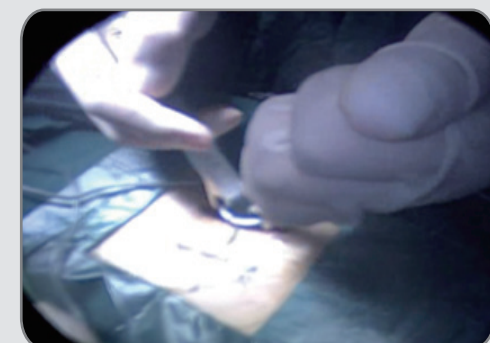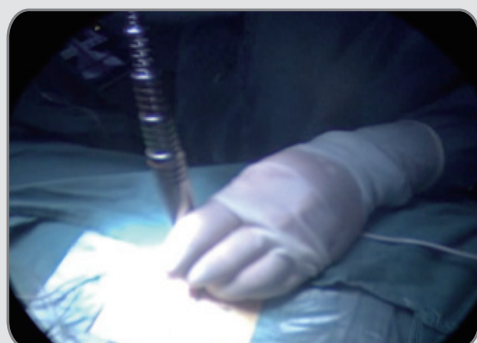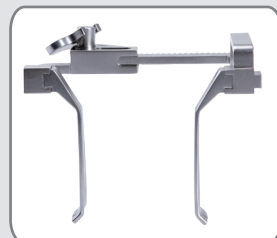

- 定位:
- 椎板定位
 - 关节突定位
 - 插入逐级套管
 - 组装撑开器并安装
 - 取出逐级套管
 - 安装侧方撑开器

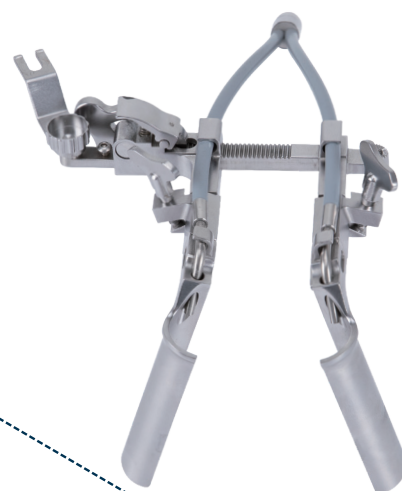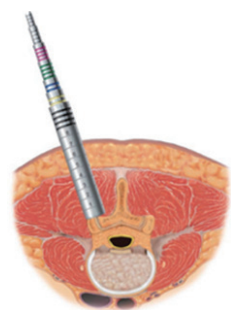

术中X光片

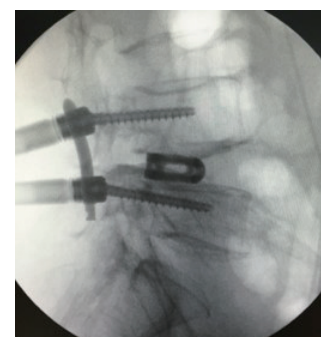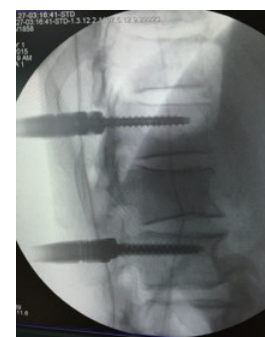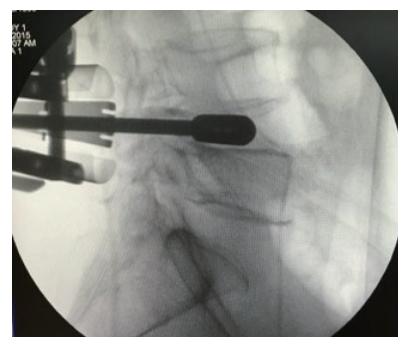

通道器械

