



A+H上市公司
A股代码 688236
H股代码 01858



PEEK材料带线锚钉

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd



北京市春立正达医疗器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd

北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号

电话Tel: 010-87321998

传真Fax: 010-80561690

www.clzd.com



关注骨科动态
欢迎扫一扫



春立医疗
视频号

广告
京械广审(文)第240721-12539号
禁忌内容或者注意事项详见说明书
仅供公司内部参考资料 2023 V1

PEEK材料带线锚钉

● 结构组成

PEEK材料带线锚钉产品由插入器、锚钉、缝线组成，锚钉根据设计型式不同分为I、II、III三种型式；插入器由手柄和旋杆组成。其中插入器手柄采用ABS材料制成，插入器旋杆采用GB/T 1220-2007规定的不锈钢材料；锚钉采用符合YY/T 0660-2008标准的聚醚醚酮材料制造；缝线为编织型缝线，其材质为超高分子聚乙烯（UHMWPE）和UHMWPE+聚丙烯（PP）。本产品适用于肩、膝、指、腕、踝、趾关节肌腱、韧带的重连接。

MB (II)




MB (III)



● 型号规格表

产品名称	型号	锚钉直径 (mm)	锚钉长度 (mm)	缝线线径 (mm)
PEEK材料带线锚钉	II 型	4.5	10~18 (每隔1mm为一个规格)	S、D、T: 2 (0.500-0.599mm)
		5.5		
		6.5		
	III 型	4.5	10~18 (每隔1mm为一个规格)	S、D、T: 2 (0.500-0.599mm)
		5.5		
		6.5		

● 产品特点

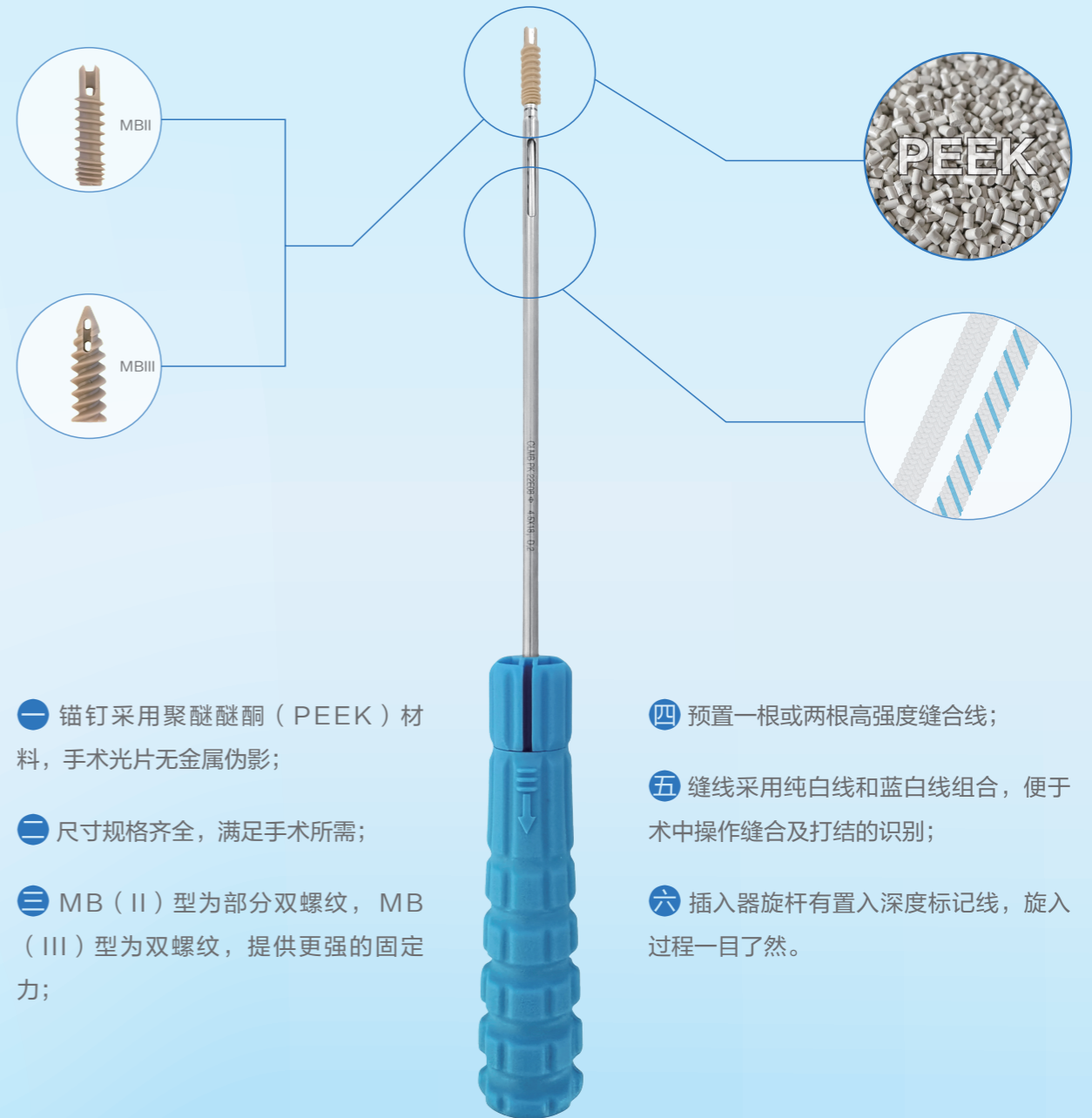

- 一 锚钉采用聚醚醚酮（PEEK）材料，手术光片无金属伪影；
- 二 尺寸规格齐全，满足手术所需；
- 三 MB（II）型为部分双螺纹，MB（III）型为双螺纹，提供更强的固定力；

- 四 预置一根或两根高强度缝合线；
- 五 缝线采用纯白线和蓝白线组合，便于术中操作缝合及打结的识别；
- 六 插入器旋杆有置入深度标记线，旋入过程一目了然。

● 适应症

适用于肩、踝、膝、肘部手术中骨与软组织的连接固定。