


A+H上市公司

A股代码 688236

H股代码 01858

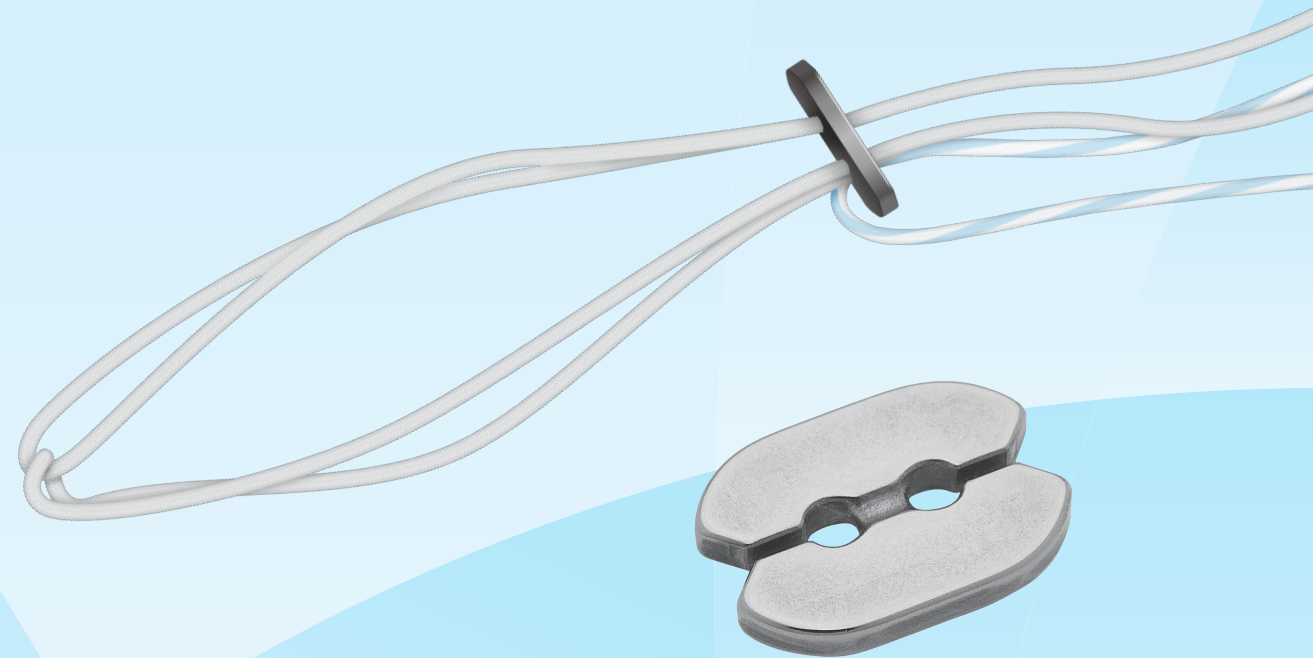

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd

北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号

电话Tel: 010-87321998

www.clzd.com

2023 V1版



关注骨科动态
欢迎扫一扫



春立医疗
视频号

广告

京械广审(文)第240721-12515号
禁忌内容或者注意事项详见说明书

带袢钛板




北京市春立正达医疗器械股份有限公司

Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd

带袢钛板

适用范围： 适用于骨科重建术中韧带与肌腱或骨的固定。

产品型号规格	产品描述
TA/8	椭圆形钛板（两端开口可拆卸）
TB/3.5,3、4	远端牵拉（可调节）
TC/3.5,3、4	近端牵拉（可调节）
TD/8	四叶草型钛板（两端开口可拆卸）
TE/14	圆形钛板（两端开口可拆卸）
TF/3、4	线圈（仅有线圈、可调节）

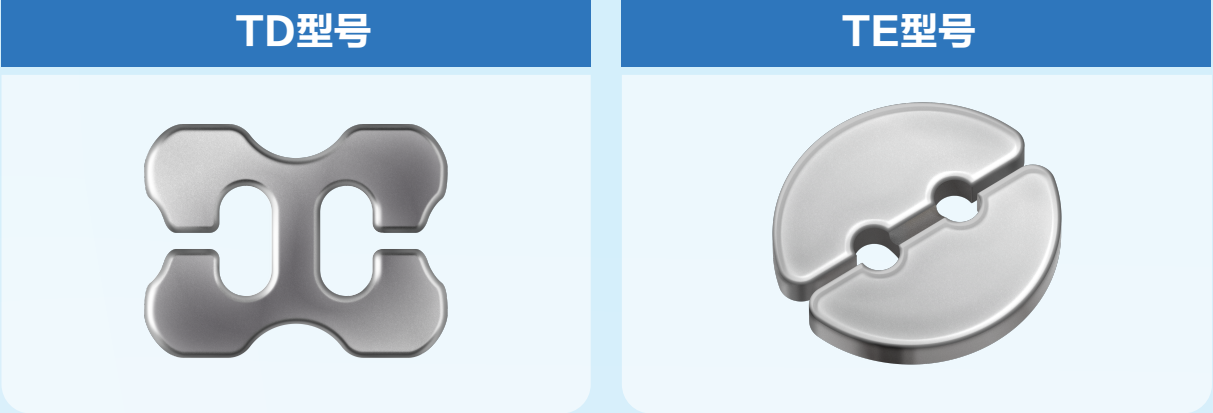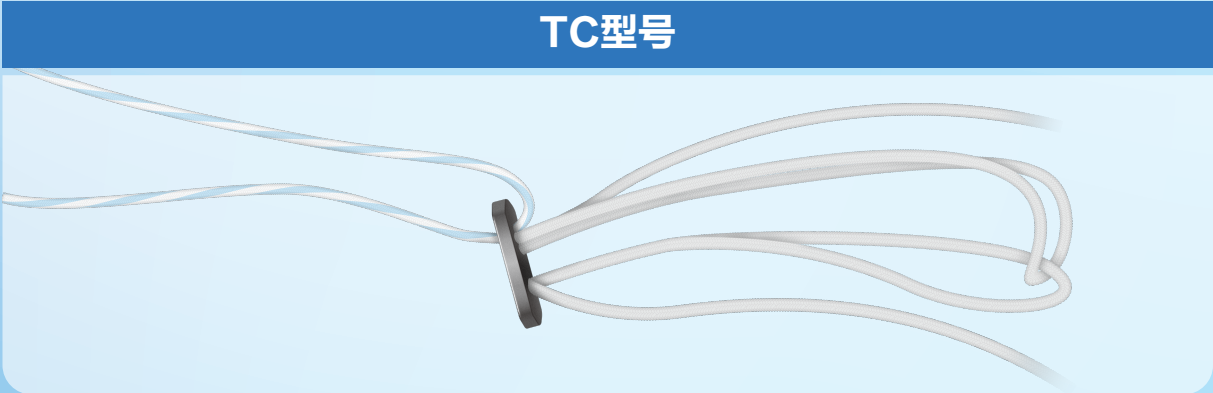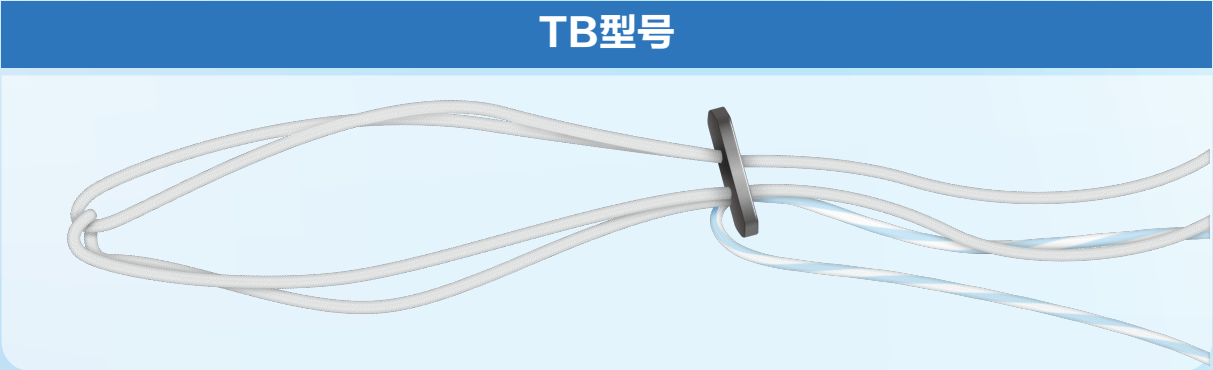

产品特点

- ①

产品种类齐全，有两端设有开口的单一板，也有长度可调节的单独线圈，还有板与线圈组合的可调节线圈长度的组合型号，适用于多种临床场景
- ②

组合的产品提供牵引线，帮助医生间接拉动移植物进行调整
- ③

产品无须翻袢线，减少使用步骤
- ④

线圈能够通过较小直径的骨道，长度可调节，能够适用于不同患者，且线圈端部适配各种型号的钛板
- ⑤

线圈或是带有线圈的组合产品能够使移植物最大程度的与骨接触
- ⑥

每种钛板上都有凹槽，能够使缝线和线结固定的同时不会造成明显的凸起

