

香港主板上市企业
春立医疗: 01858.HK



春立骨科 全球智慧
CHUNLI ORTHOPEDICS GLOBAL INTELLIGENCE

春立骨科 全球智慧
CHUNLI ORTHOPEDICS GLOBAL INTELLIGENCE



金属骨针



北京市春立正达医疗器械股份有限公司

Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd

北京市朝阳区东三环南路98号高和蓝峰大厦20层(100021)

电话Tel: 010-58611761

传真Fax: 010-58611751

www.clzd.com

400-010-1998



关注骨科动态
欢迎扫一扫


北京市春立正达医疗器械股份有限公司

Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd


金属骨针

金属骨针系列产品分为斯氏针和克氏针，供骨折复位时部分植入人体做牵引或骨科手术时内固定用

斯氏针

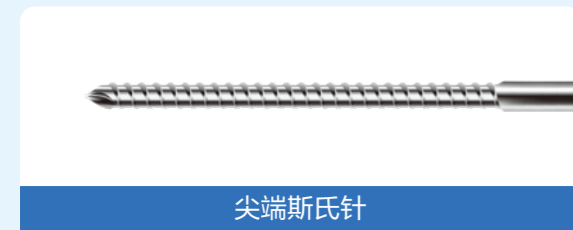


克氏针

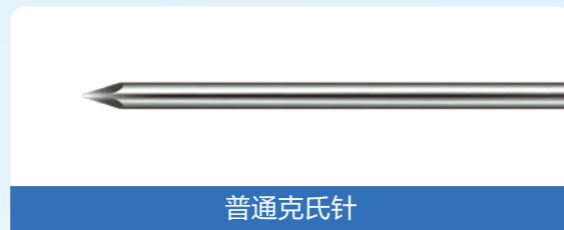

尖端斯氏针

- 具有多种直径、长度规格可供医生选择
- 适用于皮质骨区域

采用不锈钢材质，经过表面处理，耐腐蚀性能更好。

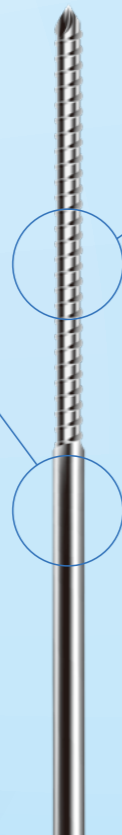

螺纹部分具有从前向后逐渐加大的圆锥形外周的螺纹部，以便旋入患者的骨头中。

尾部开有一个半圆或方形的卡接部，以便使用套筒扳手旋转骨针，进行骨针的旋入或退出。



自攻自钻型斯氏针

- 具有高切割性，能够减少摩擦，降低插入温度。
- 具有多种直径、长度规格可供医生选择

采用不锈钢材质，经过表面处理，耐腐蚀性能更好。



螺纹部分具有从前向后逐渐加大的圆锥形外周的螺纹部，以便旋入患者的骨头中

尾部开有一个平面式的卡接部，以便使用套筒扳手旋转骨针，进行骨针的旋入或退出。



普通克氏针



- 创伤小，可用于短小骨的骨折
- 适用于粉碎严重的复杂骨折
- 开放性骨折，以及矫正骨畸形使用外固定支架固定时也会使用到克氏针
- 适用于骨科中常见的撕脱性骨折或者张力性骨折；
- 对于处在生长发育期骨骺还未闭合的儿童，如果出现骨折，需要手术治疗时也可用克氏针进行固定。

限制型克氏针



- 相较于普通克氏针，限制型克氏针在主体部分有橄榄型突起，用于配合外固定支架时，当骨针穿过骨骼后，避免了发生的相对滑动的问题