



钩锁双螺纹螺钉

U型钉10/11/17/19

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd



北京市春立正达医疗器械股份有限公司

Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd

北京市朝阳区东三环南路98号高和蓝峰大厦20层 (100021)

电话Tel: 010-58611761

传真Fax: 010-58611751

www.clzd.com


400-010-1998



关注骨科动态
欢迎扫一扫


声明:

本技术手册所述内容, 供内部人员参考, 医护人员应根据患者的实际情况选择最为合适的治疗方案

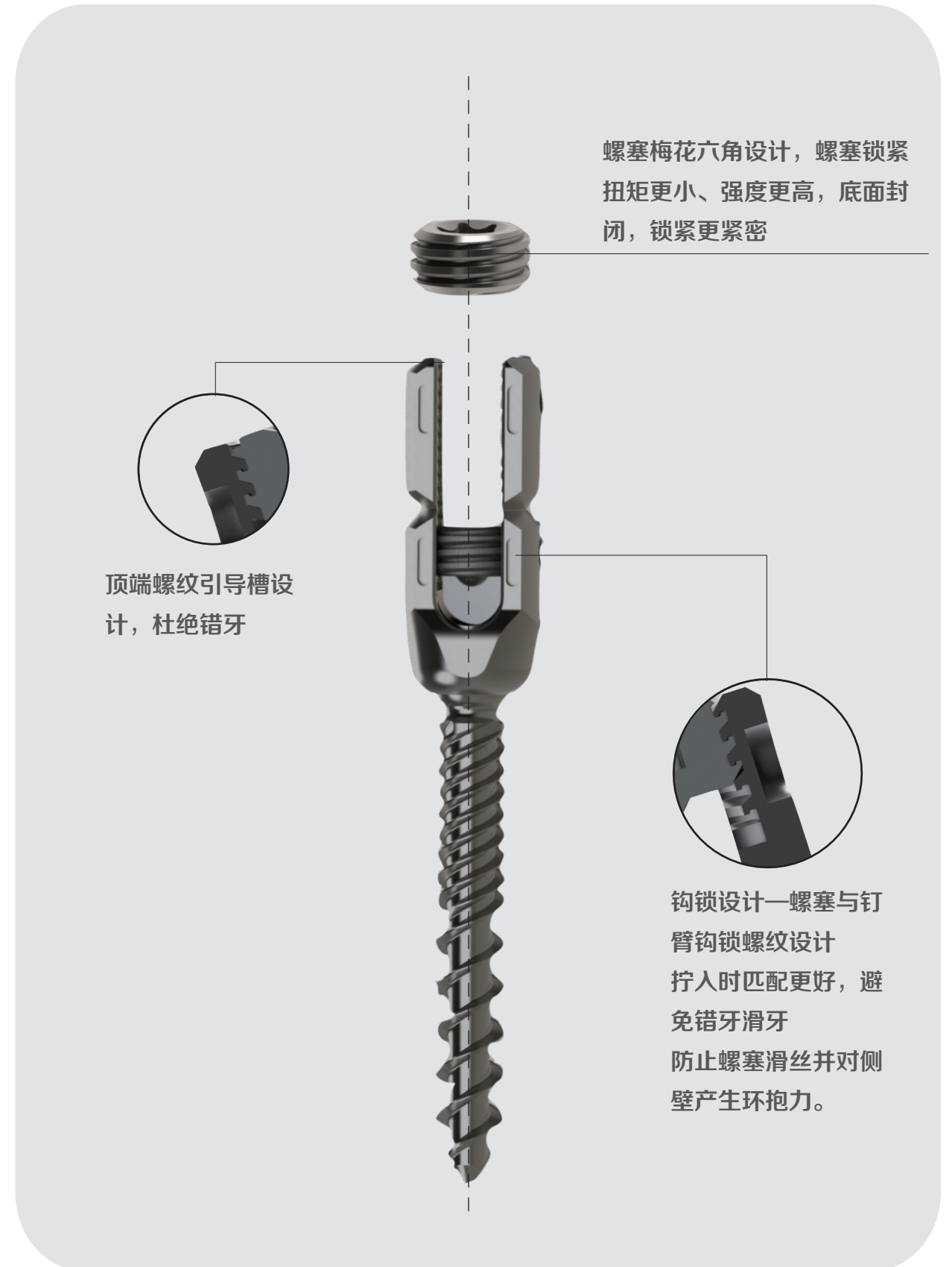

钩锁双螺纹螺钉

钩锁相伴，亲密无间！咬定“青山”不放松！

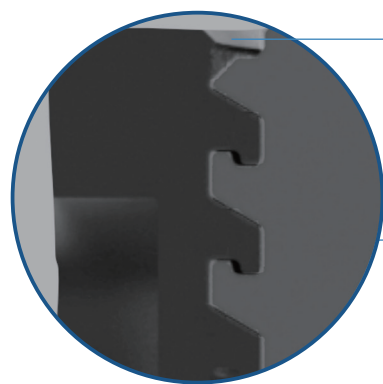

顶端螺纹引导槽设计，
杜绝错牙

钩锁设计—螺塞与钉臂钩
锁螺纹设计

拧入时匹配更好，避免错
牙滑牙


防止螺塞滑丝并对侧壁产
生环抱力



双螺纹设计，有效增加螺
钉的把持力、快速、高效、
植入螺钉

万向螺钉

固定螺钉

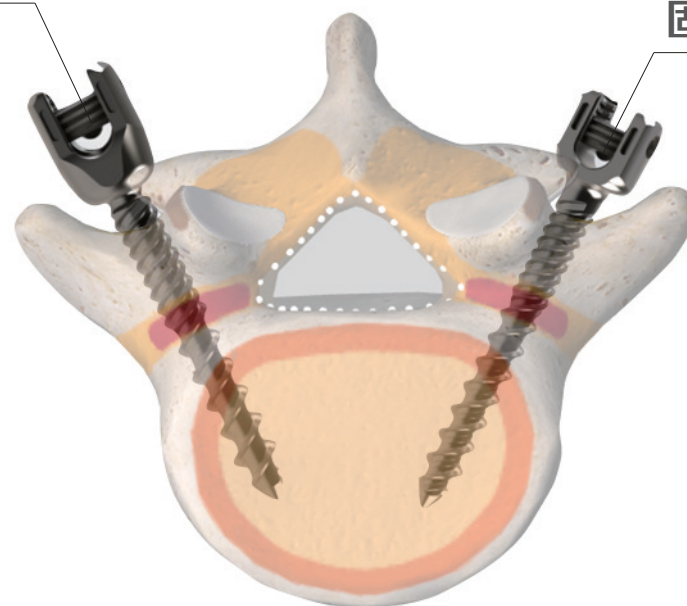

双螺纹设计：

- 固定更坚强、钉道切割小、植入转数少
- 锥形螺钉尖端有助于顺利植入椎弓根
- 尖端的螺纹有助于双皮质固定


低切迹螺钉设计：

- 减少对周围组织干扰，降低术后疼痛风险
- 更多的植骨面积，便于后外侧融合
- 钉头加强设计，提供 stronger 的固定效果




皮质骨螺纹(2mm)

松质骨螺纹(4mm)

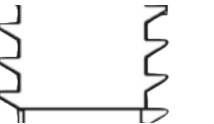名称	钩锁	方形螺纹	梯形	锯齿
图片				
力的传导				
对比结果	力向内传导，防止钉臂撑开，最优结构	力向下传导，锁紧矫形棒	力向内传导，螺牙容易损坏	力向外传导，钉臂张开

特 点	优 势
钩锁设计	杜绝螺纹滑丝，易于螺塞初始拧入 钉臂更加坚固，使医生能进行复杂操作 钉尾部棒下体积减小，增加植骨量，避免碰撞
增加皮质骨螺纹	增加接触面积，提高把持力
双线螺纹	上钉速度比普通螺钉快一倍
长短臂自由选择	型号齐全
顶部安装，顶部锁紧，一步锁紧	医生操作简单，减少手术时间

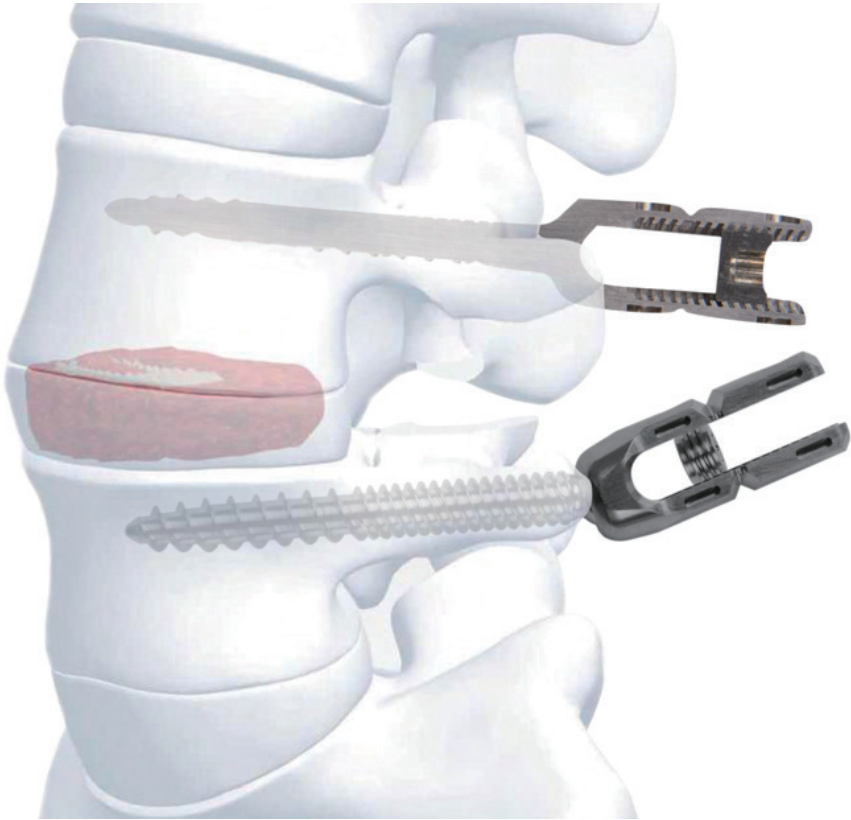

名称	图片	直径	长度	材质
U10		4.5	30	TC4
			35	
			30	
		5.0	40	
			35	
			40	
			45	
		5.5	30	
			35	
			40	
			35	
			45	
		6.0	40	
			45	
			50	
			35	
		6.5	40	
			45	
			50	
			55	
		7.0	30	
			35	
			40	
			45	
			50	
			55	

名称	图片	直径	长度	材质
U17		4.5	30	TC4
			35	
			30	
		5.0	40	
			35	
			40	
			45	
		5.5	30	
			35	
			40	
			35	
			45	
		6.0	40	
			45	
			50	
			50	

名称	图片	直径	长度	材质
U17		6.5	30	TC4
			35	
			40	
			45	
			50	
			55	
		7.0	30	
			35	
			40	
			45	
			50	
			55	
		7.5	30	
			35	
			40	
			45	
			50	
			55	

名称	图片	直径	长度	材质
U11		4.5	30	TC4
			35	
			30	
		5.0	40	
			35	
			40	
			45	
		5.5	30	
			35	
			40	
			35	
			45	
		6.0	40	
			45	
			50	
			30	
			35	
		6.5	40	
			45	
			50	
			55	
			30	
		7.0	35	
			40	
			45	
			50	
			55	

名称	图片	直径	长度	材质
U19		4.5	30	TC4
			30	
			35	
		5.0	40	
			35	
			40	
			45	
		5.5	30	
			35	
			35	
			40	
		6.0	45	
			40	
			45	
			50	
		6.5	30	
			35	
			40	
			45	
			50	
		7.0	55	
			30	
			35	
			40	
			45	
			50	
			55	

名称	图片	规格	材质
螺塞			TC4
连接板1		6.0/45	
		6.0/75	
		6.0/55	
		6.0/65	
		6.0/85	
连接板2		6.0/55	
		6.0/65	
		6.0/75	
		44/56	
		6.0/85	
连接板3		6.0/95	
		38/44	
		56/80	
		80/104	

名称	图片	直径mm	长度mm									
CFII棒 (6.0棒)		6.0	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
			90	95	100	105	115	125	135	105	115	125
			130	135	140	145	150	155	160	165	170	175
			180	185	190	195	200	455				